




















## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?												
<p><b>Hydrogel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Débridement autolytique</li> <li>✚ Plaie sans exsudat ou faible</li> <li>✚ Procure un milieu humide</li> <li>✚ Comble une cavité ou sinus en association avec compresse ou mèche, sous un pansement interactif</li> </ul> <p><b>Jamais dans les plaies infectées</b></p>	<p><b>PURILON™</b></p> 	<p><b>PURILON™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <p>⚠ Utilisation <b>UNIDOSE</b> : ne peut pas être refermé, et doit être <b>jeté après utilisation</b>.</p> <table> <tr> <td>Tube uni-service 8 g.</td> <td>Prix 2.61\$</td> <td>GRM 1200005118</td> </tr> </table>	Tube uni-service 8 g.	Prix 2.61\$	GRM 1200005118									
Tube uni-service 8 g.	Prix 2.61\$	GRM 1200005118													
<p><b>Alginat de calcium à base d'argent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorption : exsudats modérés à abondants</li> <li>✚ Effet antimicrobien</li> <li>✚ Plaie colonisée/infectée</li> </ul>	<p><b>RESTORE ALGINATE DE CALCIUM AVEC ARGENT™</b></p> 	<p><b>BIATAIN ALGINATE Ag™</b></p> 	<p>Nouveau pansement, même indication et utilisation au niveau des plaies</p> <p>👁 Faire dépasser que très peu des bords de la plaie.</p> <table> <tr> <td>Grandeur</td> <td>Prix</td> <td>GRM</td> </tr> <tr> <td>5cm x 5cm</td> <td>1.63\$</td> <td>1200005234</td> </tr> <tr> <td>10 x 10 cm</td> <td>2.60\$</td> <td>1100005231</td> </tr> </table>	Grandeur	Prix	GRM	5cm x 5cm	1.63\$	1200005234	10 x 10 cm	2.60\$	1100005231			
Grandeur	Prix	GRM													
5cm x 5cm	1.63\$	1200005234													
10 x 10 cm	2.60\$	1100005231													
<p><b>Alginat de calcium</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorption : exsudat modéré à abondant</li> <li>✚ Préviens la macération</li> <li>✚ Comble l'espace mort avec un <u>lit de plaie visible</u></li> <li>✚ Privilégier l'alginate en cas de saignement léger pour sa propriété hémostatique.</li> </ul> <p><b>Attention</b> : ne contrôle pas l'hémorragie.</p>	<p><b>Kendall™ Alginat calcium</b></p> 	<p><b>Covalon Alginat</b></p> 	<p>Nouveau pansement, même indication et utilisation au niveau des plaies</p> <p><b>Ne pas utiliser dans les sinus étroits</b></p> <table> <tr> <td>Grandeur</td> <td>Prix</td> <td>GRM</td> </tr> <tr> <td>5 x 5cm</td> <td>0.34\$</td> <td>1100002239</td> </tr> <tr> <td>10 x 20 cm</td> <td>2.13\$</td> <td>1100007295</td> </tr> <tr> <td>2.5 x 30cm</td> <td>0.66\$</td> <td>1200004167</td> </tr> </table>	Grandeur	Prix	GRM	5 x 5cm	0.34\$	1100002239	10 x 20 cm	2.13\$	1100007295	2.5 x 30cm	0.66\$	1200004167
Grandeur	Prix	GRM													
5 x 5cm	0.34\$	1100002239													
10 x 20 cm	2.13\$	1100007295													
2.5 x 30cm	0.66\$	1200004167													






## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

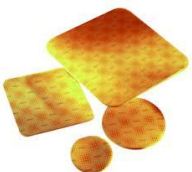Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?									
<p><b>Fibre gélifiante avec fibre de renfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorbe et retient les exsudats (plaies modérément à fortement exsudatives).</li> <li>✚ Crée un gel cohésif dans le lit de plaie</li> <li>✚ Maintient un milieu humide</li> <li>✚ Favorise la détersion autolytique.</li> <li>✚ Limite les risques de macération au niveau des berges</li> </ul>	<p><b>AQUACEL™</b></p> 	<p><b>AQUACEL™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <p>● Différence : contient un tramage qui permet de le retirer plus facilement sans laisser de résidu.</p> <p>● <u>La mèche à utiliser de manière judicieuse, dans des cavités de plaies qui sont visibles à l'œil.</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grandeur</th> <th style="text-align: left;">Prix</th> <th style="text-align: left;">GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mèche 1 x 45 cm</td> <td>10.40\$</td> <td>1200005336</td> </tr> <tr> <td>Mèche 2 X 45 cm</td> <td>7.42\$</td> <td>1200002764</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	Mèche 1 x 45 cm	10.40\$	1200005336	Mèche 2 X 45 cm	7.42\$	1200002764
Grandeur	Prix	GRM										
Mèche 1 x 45 cm	10.40\$	1200005336										
Mèche 2 X 45 cm	7.42\$	1200002764										
<p><b>Fibres gélifiantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorbe et retient les exsudats (plaies modérément à fortement exsudatives).</li> <li>✚ Crée un gel cohésif dans le lit de plaie</li> <li>✚ Maintient un milieu humide</li> <li>✚ Favorise la détersion autolytique.</li> <li>✚ Limite les risques de macération au niveau des berges</li> </ul>	<p><b>AQUACEL EXTRA™</b></p> 	<p><b>BIOSORB™</b></p> 	<p>Nouveau pansement, même indication et utilisation au niveau des plaies</p> <p>Le pansement doit déborder du lit de plaie pour son absorption vertical</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grandeur</th> <th style="text-align: left;">Prix</th> <th style="text-align: left;">GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 x 10 cm</td> <td>4.25\$</td> <td>1200002808</td> </tr> <tr> <td>15 x 15 cm</td> <td>9.40\$</td> <td>1200002807</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	10 x 10 cm	4.25\$	1200002808	15 x 15 cm	9.40\$	1200002807
Grandeur	Prix	GRM										
10 x 10 cm	4.25\$	1200002808										
15 x 15 cm	9.40\$	1200002807										
<p><b>Fibre gélifiante avec argent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorbe et retient les exsudats (plaies modérément à fortement exsudatives).</li> <li>✚ Crée un gel dans le lit de plaie</li> <li>✚ Maintient un milieu humide</li> <li>✚ Limite les risques de macération au niveau des berges</li> <li>✚ Action antimicrobienne</li> </ul>	<p><b>AQUACEL® Ag EXTRA™</b></p> 	<p><b>AQUACEL® Ag EXTRA™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <p>Le pansement doit déborder du lit de plaie pour son absorption vertical</p> <p>● À utiliser sur des <b>plaies infectées ou colonisées.</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grandeur</th> <th style="text-align: left;">Prix</th> <th style="text-align: left;">GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 X 10cm</td> <td>8.20\$</td> <td>1200002805</td> </tr> <tr> <td>15 X 15cm</td> <td>18.20\$</td> <td>1200003106</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	10 X 10cm	8.20\$	1200002805	15 X 15cm	18.20\$	1200003106
Grandeur	Prix	GRM										
10 X 10cm	8.20\$	1200002805										
15 X 15cm	18.20\$	1200003106										



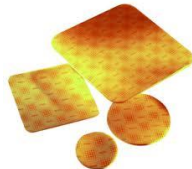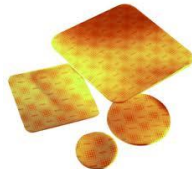


## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?			
<p><b>Hydrocolloïde mince</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Créé un environnement humide pour les plaies superficielles peu ou pas exsudatives</li> <li>✚ Favorise un débridement autolytique</li> <li>✚ Réduit la friction</li> <li>✚ Protège les berges avec la TPPN</li> </ul> <p><b>Jamais sur les plaies infectées</b></p>	<p><b>COMFEEL Plus transparent™</b></p> 	<p><b>COMFEEL Plus transparent™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <table border="0"> <tr> <td>Grandeur 10X10cm</td> <td>Prix 0.82\$</td> <td>GRM 1001004942</td> </tr> </table>	Grandeur 10X10cm	Prix 0.82\$	GRM 1001004942
Grandeur 10X10cm	Prix 0.82\$	GRM 1001004942				
<p><b>Hydrocolloïde régulier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Créé un environnement humide pour les plaies superficielles avec exsudat faible à modéré</li> <li>✚ Favorise un débridement autolytique</li> <li>✚ Réduit la friction</li> </ul> <p><b>Jamais sur les plaies infectées</b></p>	<p><b>DUODERM signal™</b></p> 	<p><b>DUODERM signal™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <table border="0"> <tr> <td>Grandeur 10X10cm</td> <td>Prix 2.03\$</td> <td>GRM 1200004160</td> </tr> </table>	Grandeur 10X10cm	Prix 2.03\$	GRM 1200004160
Grandeur 10X10cm	Prix 2.03\$	GRM 1200004160				
<p><b>Mousse hydrocellulaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorption des exsudats faible à modérés</li> <li>✚ Permet les échanges gazeux</li> <li>✚ Garde le milieu relativement humide selon les besoins de la plaie</li> </ul>	<p><b>BIATAIN™2 grandeurs</b></p> 	<p><b>Allevyn non-adhésif™</b></p> 	<p>Nouveau pansement, même indication et utilisation au niveau des plaies</p> <p> <b>Border la mousse</b> avec l'adhésif approprié (Opsite™ – Hypafix™ – etc)</p> <table border="0"> <tr> <td>Grandeur 5X7cm 20x20cm</td> <td>Prix 0.90\$ 6.95\$</td> <td>GRM 1001004829 1200002767</td> </tr> </table>	Grandeur 5X7cm 20x20cm	Prix 0.90\$ 6.95\$	GRM 1001004829 1200002767
Grandeur 5X7cm 20x20cm	Prix 0.90\$ 6.95\$	GRM 1001004829 1200002767				

## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?															
<p><b>Mousse hydrocellulaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absorption vertical des exsudats modérés</li> <li>Permet les échanges gazeux</li> <li>Garde le milieu relativement humide selon les besoins de la plaie</li> </ul>	<p><b>BIATAIN™ Soft Hold</b> 3 grandeurs</p> 	<p><b>BIATAIN™ Soft Hold</b> 3 grandeurs</p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <p>La partie que l'on colle à la plaie (la partie blanche) du BIATAIN™ Soft Hold est enduite d'une couche adhérente ce qui facilite l'application et son maintien en place. <b><u>Retirer la pellicule qui la recouvre pour l'application.</u></b></p> <table> <thead> <tr> <th>Grandeur</th> <th>Prix</th> <th>GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10x10cm</td> <td>1.95\$</td> <td>1200005137</td> </tr> <tr> <td>10x20cm</td> <td>2.21\$</td> <td>1200005138</td> </tr> <tr> <td>15x15cm</td> <td>4.37\$</td> <td>1200005139</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	10x10cm	1.95\$	1200005137	10x20cm	2.21\$	1200005138	15x15cm	4.37\$	1200005139			
Grandeur	Prix	GRM																
10x10cm	1.95\$	1200005137																
10x20cm	2.21\$	1200005138																
15x15cm	4.37\$	1200005139																
<p><b>Mousse hydrocellulaire auto-fixant avec induction de silicone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absorption : exsudats modérés à abondant</li> <li>Permet les échanges gazeux</li> <li>Garde le milieu relativement humide</li> <li>Ne nécessite pas d'adhésif supplémentaire</li> <li>Imperméable pour la douche</li> <li>Retrait atraumatique</li> </ul>	<p><b>ALLEVYN GENTLE BORDER™</b> 4 grandeurs</p> 	<p><b>Mepilex Border™</b></p> 	<p>Nouveau pansement, même indication et utilisation au niveau des plaies</p> <p> Ne pas appliquer de protecteur cutané, empêche une bonne adhésion</p> <table> <thead> <tr> <th>Grandeur</th> <th>Prix</th> <th>GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.5X7.5cm</td> <td>1.50\$</td> <td>1200005136</td> </tr> <tr> <td>10 x10cm</td> <td>1.59\$</td> <td>1200002768</td> </tr> <tr> <td>12.5 x12.5cm</td> <td>2.28\$</td> <td>1200003111</td> </tr> <tr> <td>17.5x17.5cm</td> <td>4.68\$</td> <td>1200002770</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	7.5X7.5cm	1.50\$	1200005136	10 x10cm	1.59\$	1200002768	12.5 x12.5cm	2.28\$	1200003111	17.5x17.5cm	4.68\$	1200002770
Grandeur	Prix	GRM																
7.5X7.5cm	1.50\$	1200005136																
10 x10cm	1.59\$	1200002768																
12.5 x12.5cm	2.28\$	1200003111																
17.5x17.5cm	4.68\$	1200002770																

## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

<p><b>Multi couches avec recouvrement adhésif imperméable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorption : exsudat léger</li> <li>✚ Débridement avec hydrogel sur plaie superficielle peu exsudative</li> <li>✚ Imperméable à la douche</li> </ul>	<p><b>DUDRESS™</b></p> 	<p><b>DUDRESS™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grandeur</th> <th>Prix</th> <th>GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10x10cm</td> <td>1.00\$</td> <td>1200005114</td> </tr> <tr> <td>15x20cm</td> <td>2.23\$</td> <td>1200005115</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	10x10cm	1.00\$	1200005114	15x20cm	2.23\$	1200005115						
Grandeur	Prix	GRM																
10x10cm	1.00\$	1200005114																
15x20cm	2.23\$	1200005115																
<p><b>Coussinet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorption : plaies fortement exsudatives</li> <li>✚ Tous types de plaies</li> </ul>	<p><b>MESORB™ 4 grandeurs</b></p> 	<p><b>MESORB™ 4 grandeurs</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <p>Utile pour les plaies qui sont fortement exsudatives avec réfection fréquente.</p> <p>Peut être utilisé en pansement primaire, ou secondaire avec :non-adhérent, alginate, fibre gélifiante, anti-odeur, etc...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grandeur</th> <th>Prix</th> <th>GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 X 13cm</td> <td>0.36\$</td> <td>1200002903</td> </tr> <tr> <td>10 X 23cm</td> <td>0.65\$</td> <td>1200002896</td> </tr> <tr> <td>15X23cm</td> <td>0.75\$</td> <td>1200002897</td> </tr> <tr> <td>23X30cm</td> <td>1.30\$</td> <td>1200001705</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	10 X 13cm	0.36\$	1200002903	10 X 23cm	0.65\$	1200002896	15X23cm	0.75\$	1200002897	23X30cm	1.30\$	1200001705
Grandeur	Prix	GRM																
10 X 13cm	0.36\$	1200002903																
10 X 23cm	0.65\$	1200002896																
15X23cm	0.75\$	1200002897																
23X30cm	1.30\$	1200001705																
<p><b>Mèche absorbant imprégné de chlorure de sodium</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Absorption des exsudats modérés Pas de changement même produit et fortement exsudatives <b>seulement</b></li> <li>✚ Permet de nettoyer les plaies</li> <li>✚ Convient aux plaies infectées en phase inflammatoire</li> </ul>	<p><b>MESALT™</b></p> 	<p><b>MESALT™</b></p> 	<p>Pas de changement même produit</p> <p>Utile pour les petites plaies très exsudatives qui persistent dans leurs phases inflammatoires. Les plaies peuvent contenir des tissus nécrotiques humides et/ou être infectées.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grandeur</th> <th>Prix</th> <th>GRM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x100cm</td> <td>4.23\$</td> <td>1200002078</td> </tr> <tr> <td>10X10cm</td> <td>0.99\$</td> <td>1200004150</td> </tr> </tbody> </table>	Grandeur	Prix	GRM	2x100cm	4.23\$	1200002078	10X10cm	0.99\$	1200004150						
Grandeur	Prix	GRM																
2x100cm	4.23\$	1200002078																
10X10cm	0.99\$	1200004150																

## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

### Non-adhérent imprégné de corps gras (paraffine)

- Protège le lit de la plaie
- Minimise le traumatisme et la douleur lors du retrait de pansement
- Peut être utilisé en interface avec la thérapie de plaie à pression négative (TPPN)
- Peut être associé avec des produits topiques

**JELONET™**  
3 grandeurs dont 2 sur demande.



**JELONET™**  
3 grandeurs dont 2 sur demande.



Pas de changement même produit  
10x40cm et 10cm x 7m (achat direct)

Grandeur	Prix	GRM
10 X10cm	0.40\$	1100004574
*10x40cm	0.97\$	1200001719
*10cmx7m	16.36\$	1200005071

### Anti-odeur avec argent

- Contrôle les odeurs
- Action antibactérienne
- Ne pas découper
- Peut être utilisé dans les cavités

**ACTISORB SILVER 220™**



**ACTISORB SILVER 220™**



Pas de changement même produit

Grandeur	Prix	GRM
10.5X10.5cm	4.00\$	1010007809
10x19 cm	7.30\$	1200005117

### Pansement antimicrobien 100% coton imprégné avec 0.2% Polyhexaméthylène Biguanide (PHMB)

- Rouleau de coton pour remplir des cavités profondes
- Mèche pour les cavités plus petites ou le fond de la plaie est visible
- Tue les bactéries et prévient la pénétration et la prolifération bactériennes à l'intérieur du pansement

**KERLIX AMD™**  
**CURITY AMD™ MÈCHE**



**KERLIX AMD™**  
**CURITY AMD™ MÈCHE**



Pas de changement même produit

Peuvent être insérées humides ou sec dans la cavité.

Ne pas compacter et insérer **la mèche en un seul morceau**

Noter le nombre de rouleau (Kerlix™) inséré dans la cavité sur le **pansement extérieur ET dans les notes inf.**

Grandeur	Prix	GRM
0.6 cm x 0.9 m	1.60\$	1200004085
1.3cmX0.9m	1.70\$	1200002201
2.5cm X 0.9M	1.80\$	1200004084
11.4cmX3.7m	3.00\$	1200002906

## Des pansements ont changé dans le CIUSSS NIM !

### Pansement non-adhérent antimicrobien à base d'iode

- ✚ Pour les plaies colonisées / infectées
- ✚ Application sur le lit de plaie avec ou sans exsudat
- ✚ Peut être utilisé en interface avec la thérapie de plaie à pression négative (TPPN)
- ✚ Lorsque la couleur marron s'estompe, c'est signe qu'il y a une perte d'efficacité et qu'il faut changer le pansement.

#### INADINE™



#### INADINE™



Pas de changement même produit

Le pansement est un tulle de couleur marron imprégné d'iode.

Il est à appliquer directement sur le lit de la plaie.

Grandeur	Prix	GRM
5 x5cm	1.25\$	1200002813
9.5x9.5 cm	2.00\$	1200002814

### Pansement bleu méthylène et violet cristallisé Éponge à base de polyvinyle alcool

- ✚ Absorption modérée à abondante
- ✚ Antimicrobien
- ✚ Se conforme aux plaies profondes et superficielles
- ✚ Favorise le débridement autolytique
- ✚ Compatible avec le débridement enzymatique (Santyl®) et les facteurs de croissance du fibroblaste
- ✚ Non cytotoxique

#### HYDROFERA BLUE CLASSIC™



#### HYDROFERA BLUE CLASSIC™



Pas de changement même produit

⚠ Ne pas compacter et si utilisé comme une mèche l'insérer **la mèche en un seul morceau**

Grandeur	Prix	GRM
10 X 10CM	7.00\$	1200002913

### Pansement bleu méthylène et violet cristallisé Éponge prêt à l'usage, mousse en polyuréthane

- ✚ Pour les plaies superficielles avec exsudats modérés à abondants
- ✚ Contrôle la charge microbienne
- ✚ Aide à maintenir l'équilibre hydrique

#### HYDROFERA BLUE READY™



🌱 Nouveau produit

**Ne pas humidifier avant l'application**

Grandeur	Prix	GRM
10 X 13CM	10.30\$	4200000317